




Liukumateriaalit – Liu'uta nostamisen sijasta

Liukumista edistävät materiaalit poistavat kitkaa kehon ja alustan välistä ja helpottavat sekä potilaan omatoimista siirtymistä että hoitajan avustustyötä. Hyvän toimintakyvyn omaava henkilö voi siirtyessään nostaa kehon osiaan tai raajojaan kitkan poistamiseksi. Lihasvoimien heikentyminen, raajojen jäykkyys ja tasapaino-ongelmat kuitenkin voivat estää kehon osien nostamisen, jolloin liikkeen aikaan saamiseksi kitkaa tulee poistaa jollain liukumateriaalilla.

Liukumateriaalin malli ja koko valitaan henkilön toimintakyvyn ja siirtymistilanteen mukaan. Materiaalin valinnassa on tärkeää huomioida myös se, tulisiko liukumateriaalin olla koko ajan potilaan alla vai käytetäänkö sitä vain siirtymisen ajan. Lisäksi tärkeää oikean mallin valinnassa on huomioida käyttötärpeen tiheys, puhdistusominaisuudet ja toimintaympäristön hygieniatason vaatimukset.

Makuuasennossa tasolta toiselle siirtäminen

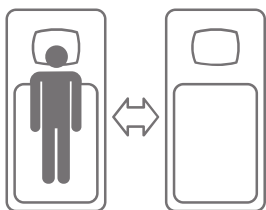


Potilaan toimintakyky: Potilas ei osallistu siirtotilanteeseen aktiivisesti

Liukumateriaalin käyttötarkoitus: Kitkan vähentäminen koko vartalon mitalta

nimike	Suositellut liukumateriaalimallit ja koot	Liukumateriaalin tyyppi			
		Pestävä	Pestävä/ pyyhittävä	Potilas- kohtainen	Alle jätettävä
PM-1010	Liukupatja Alpha 190 x 60 cm	x			

jatkuu seuraavalla sivulla ►►►


Sivusuunnassa siirtyminen, kyljelle kääntyminen ja vuoteessa ylöspäin siirtyminen

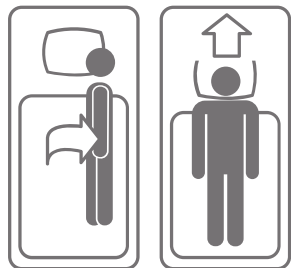

Potilaan toimintakyky: Potilas ei pysty koukistamaan polviaan selinmakuulla, alaraajat jäykät

Liukumateriaalin käyttötarkoitus: Kitkan vähentäminen koko vartalon mitalta

nimike	Suositellut liukumateriaalimallit ja koot	Liukumateriaalin tyyppi			
		Pestävä	Pestävä/ pyyhittävä	Potilas- kohtainen	Alle jätettävä
PM-1010	Liukupatja Alpha 190 x 60 cm	x			
BM-S-1970	Liukupatja Blue Motion Soft 195 x 70 cm		x		
PM-060.60-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 2 m pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.70-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 70 cm, repäise n. 2 m pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.65-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 2 m pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	

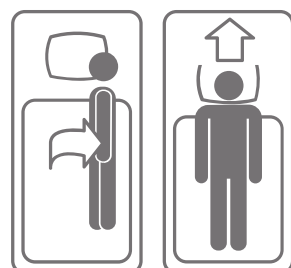


Potilaan toimintakyky: Potilas pystyy koukistamaan polvet selinmakuulla, mutta hänellä ei ole ponnistusvoimaa alaraajoissa

Liukumateriaalin käyttötarkoitus: Kitkan vähentäminen lantion ja hartioiden alta

nimike	Suositellut liukumateriaalimallit ja koot	Liukumateriaalin tyyppi			
		Pestävä	Pestävä/ pyyhittävä	Potilas- kohtainen	Alle jätettävä
PM-1210	Liukupatja Alpha 100 x 70 cm	x			
PM-1220	Liukupatja Alpha 100 x 70 cm, puuvilla	x			x
PM-1215	Liukupatja Alpha 110 x 75 cm, suurempikokoiselle käyttäjälle	x			
PM-1420	Liukupatja Alpha 140 x 90 cm, kiinnityksremmit, puuvilla	x			x
PM-2095	Liukupatja Alpha Caremaster M, avoin malli	x			
PM-2097	Liukupatja Alpha Caremaster L, avoin malli	x			
BM-S-1170	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 110 x 70 cm		x		
PM-060.60-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 1 m pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.70-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 70 cm, repäise n. 1 m pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.65-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 1 m pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	

jatkuu seuraavalla sivulla ►►►

Sivusuunnassa siirtyminen, kyljelle kääntyminen ja vuoteessa ylöspäin siirtyminen

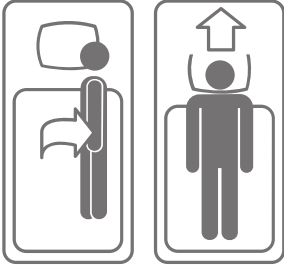


Potilaan toimintakyky: Potilas pystyy koukistamaan polvet selinmakuulla ja hänellä on ponnistusvoimaa alaraajoissa

Liukumateriaalin käyttötarkoitus: Kitkan vähentäminen lantion tai hartioiden alta

nimike	Suositellut liukumateriaalimallit ja koot	Liukumateriaalin tyyppi			
		Pestävä	Pestävä/ pyyhittävä	Potilas- kohtainen	Alle jätettävä
PM-2010	Liukupatja Alpha 50 x 60 cm, polyesteri	x			
PM-2020	Liukupatja Alpha 50 x 60 cm, puuvilla	x			x
PM-2095	Liukupatja Alpha Caremaster M, avoin malli	x			
PM-2097	Liukupatja Alpha Caremaster L, avoin malli	x			
BM-S-0560	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 52 x 60 cm		x		
BM-S-0652	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 60 x 52 cm		x		
BM-S-0907	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 90 x 70 cm		x		
PM-060.60-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.70-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 70 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.65-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	

Vuoteen selkäosan kohottaminen, hyvään asentoon tukeminen

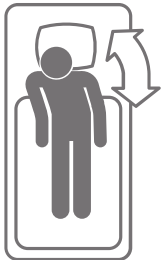

Potilaan toimintakyky: Potilas pystyy itse, pienellä avustuksella tai täysin avustettuna liikuttamaan hartioitaan sivusuunnassa pienin liikkein liukumateriaalin avulla

Liukumateriaalin käyttötarkoitus: Kitkan vähentäminen hartioiden alta

nimike	Suositellut liukumateriaalimallit ja koot	Liukumateriaalin tyyppi			
		Pestävä	Pestävä/ pyyhittävä	Potilas- kohtainen	Alle jätettävä
PM-2010	Liukupatja Alpha 50 x 60 cm, polyesteri	x			
PM-2020	Liukupatja Alpha 50 x 60 cm, puuvilla	x			x
PM-2095	Liukupatja Alpha Caremaster M, avoin malli	x			
PM-2097	Liukupatja Alpha Caremaster L, avoin malli	x			
BM-S-0560	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 52 x 60 cm		x		
BM-S-0652	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 60 x 52 cm		x		
BM-S-0907	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 90 x 70 cm		x		
PM-060.60-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.70-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 70 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.65-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	

jatkuu seuraavalla sivulla ►►►

Siirtyminen istuma-asennossa




Potilaan toimintakyky: Potilas pystyy itse tai avustettuna siirtymään liukulaudalla istuma-asennossa

Liukumateriaalin käyttötarkoitus: Edistää lantion liukumista liukulaudalla, esim. siirryttäessä ilman vaatteita

nimike	Suositellut liukumateriaalimallit ja koot	Liukumateriaalin tyyppi			
		Pestävä	Pestävä/ pyyhittävä	Potilas- kohtainen	Alle jätettävä
PM-2010	Liukupatja Alpha 50 x 60 cm, polyesteri	x			
PM-2020	Liukupatja Alpha 50 x 60 cm, puuvilla	x			
BM-S-0560	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 52 x 60 cm		x		
BM-S-0652	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 60 x 52 cm		x		
PM-060.60-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.70-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 70 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.65-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	

Istuma-asennon kohentaminen

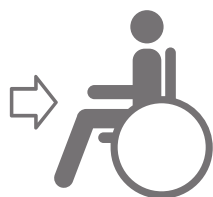


Potilaan toimintakyky: Potilas pystyy itse tai avustettuna siirtymään istuimella taaksepäin, kun lantion alta vähennetään kitkaa

Liukumateriaalin käyttötarkoitus: Edistää lantion liukumista istuimella taaksepäin

nimike	Suositellut liukumateriaalimallit ja koot	Liukumateriaalin tyyppi			
		Pestävä	Pestävä/ pyyhittävä	Potilas- kohtainen	Alle jätettävä
BM-S-0560	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 52 x 60 cm		x		
BM-S-0652	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 60 x 52 cm		x		
PM-060.60-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)		x		
PM-060.70-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 70 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.65-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	

jatkuu seuraavalla sivulla ►►►

Nostoliinan pukeminen

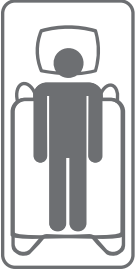

Potilaan toimintakyky: Potilas ei pysty nojautumaan eteenpäin istuma-asennossa nostoliinan asettamiseksi selän alle tai potilas on kipuihminen tai jäykkä ja nostoliinan pukeminen makuuasennossa kylkimakuulle kääntäen on hankalaa


Liukumateriaalin käyttötarkoitus: Edistää nostoliinan liukumista paikoilleen selän taakse

nimike	Suositellut liukumateriaalimallit ja koot	Liukumateriaalin tyyppi			
		Pestävä	Pestävä/ pyyhittävä	Potilas- kohtainen	Alle jätettävä
BM-S-0560	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 52 x 60 cm		x		
BM-S-0652	Liukuputkikangas Blue Motion Soft 60 x 52 cm		x		
PM-060.60-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.70-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 70 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	
PM-060.65-100	Potilaskohtainen liukumuovi OnlyU leveys 60 cm, repäise n. 60 cm pitkä pala (merkkiviivat 50cm välein)			x	

Suosittelujen liukumateriaalien kuvat



Liukupatja Alpha

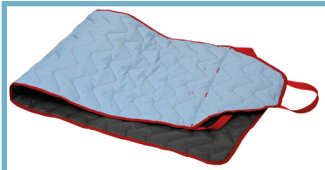

Liukupatja Alpha
Caremaster



Liukupatja Alpha
puuvilla



Liukuputkikangas Blue
Motion Soft



Potilaskohtainen
liukumuovi OnlyU

